

yuwell

BREATHCARE III

YH-680A (AUTO-CPAP)

YH-680B (AUTO-CPAP)



Način rada:	CPAP, Auto CPAP
Raspon tlaka:	4 to 20
Rampa:	0-60 min
Kapacitet ovlaživača:	300ml
Početni tlak rampe:	4cm H2O
Razina buke:	27db(A)
Težina:	1,5kg
Dimenzije:	13.5x10.5x26.5
Certifikati:	CE
Jamstvo:	Uređaj: 2 godine Ovlaživač i crijevo za zrak- 90 dana

- 3,5 inch zaslon na dodir
- Test maske
- Iznimno tih
- Praćenje višestrukih događaja tijekom spavanja
- FPS-tech
- Auto-all(Auto rampa/humidity/heated tubing)
- Inteligentni algoritam
- Wireless data system

CONFIGURATION



Ovlaživač



Punjač
220V, 50Hz



Crijevo za zrak



Maska- YN-02



SD-kartica



Filter za zrak



Torba za nošenje



Besplatna platforma

OPCIONALNO

1. Modul za prijenos podataka(WiFi ili SIM kartica)
2. Grijano crijevo




NOVI DIZAJN

PRAKTIČAN LCD ZASLON NA DODIR

Napredne funkcije CPAP uređaja pojednostavljene su u intuitivne kontrole na dodir. Velik i osjetljiv zaslon omogućuje brzo i jednostavno podešavanje svih postavki.

TEST PRILAGODBE MASKE

Kratki test pristajanja maske prije spavanja osigurava savršeno prijanjanje, čime se povećava udobnost i pruža dodatna sigurnost korisnicima tijekom uspjavanja.

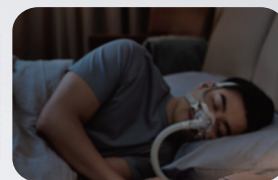

IZNIMNO TIHI RAD

Novo razvijeni ventilator i optimizirani dizajn protoka zraka omogućuju izuzetno tih rad uređaja BreathCare III.

PRAĆENJE VIŠESTRUKIH DOGAĐAJA TIJEKOM SPAVANJA

Novo integrirano prepoznavanje RERA-e i drugih respiratornih događaja tijekom spavanja čini praćenje i terapiju uređaja BreathCare III sveobuhvatnijima i profesionalnijima.



TEHNOLOGIJA U POKRETU

AUTO-ALL NAČIN RADA

Automatizirane postavke omogućuju pacijentima jednostavno korištenje terapije uz minimalne komplikacije i bolju suradljivost (pridržavanje terapije).

INTELIGENTNI ALGORITAM

Optimizirani terapijski algoritam s dodatnim praćenjem respiratornih događaja osigurava sveobuhvatnije i ugodnije iskustvo liječenja.

BEŽIČNI SUSTAV PODATAKA

Besprijekoran sustav temeljen na oblaku omogućuje svim sudionicima zdravstvene mreže pristup podacima o terapiji putem prilagođenog portala, uz jednostavno i praktično korištenje.



JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD

Manufacturing Address: No.1 Baisheng Road, Development Zone, Danyang, Jiangsu Province, P.R.China

Tel: 86-0511-8690 0859 86-0511-8690 0860

E-mail: yuwell@yuyue.com.cn; sales@yuyue.com.cn

www.yuwell.com

f | t | in | @ | Yuwell Global